

# COVID-VIRO<sup>®</sup> nasal Test Antigénique rapide COVID-19 **MODE OPÉRATOIRE**

## CONTENU DU KIT

- 1 cassette test
- 1 tube d'extraction
- 1 embout avec filtre
- 1 écouvillon nasal stérile
- 1 notice d'utilisation




Lire attentivement  
la notice d'utilisation

## 1 PRÉPARATION DU MATÉRIEL




**a** Insérer le tube d'extraction  
au fond du support  
puis enlever l'opercule

## 2 PRÉLÈVEMENT NASAL

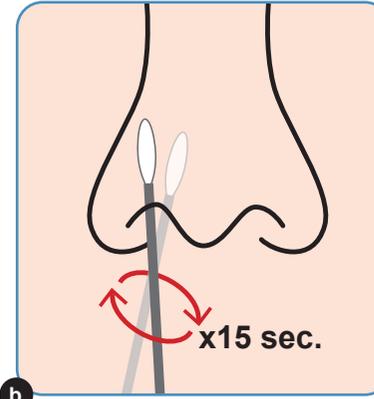


**b** Introduire l'écouvillon dans une narine.  
Faire au moins 5 rotations (15 secondes)  
en frottant l'écouvillon contre  
la paroi interne de la narine

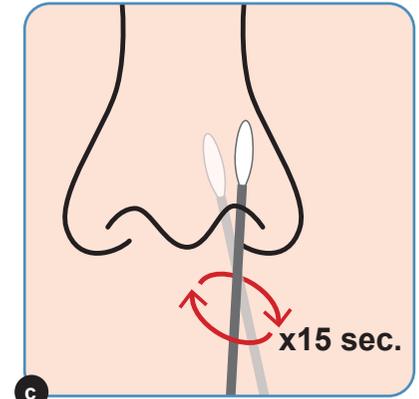

**c** Répéter, avec le même  
écouvillon, la même opération  
dans la 2<sup>ème</sup> narine


## 3 PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON

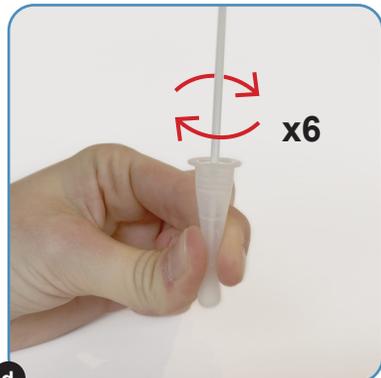

**d** Plonger l'écouvillon dans le tube  
d'extraction et le tourner au moins  
6 fois tout en pressant sa tête  
contre le fond et les côtés  
du tube d'extraction



**e** Laisser reposer  
l'écouvillon 1 minute  
dans le tube d'extraction

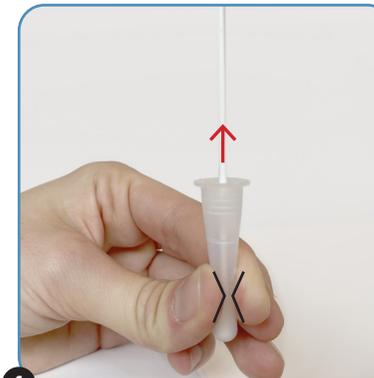

**f** Retirer l'écouvillon en  
le pressant contre les parois  
du tube d'extraction et le jeter



**g** Insérer l'embout avec filtre  
sur le tube d'extraction  
**L'EMBOÛT DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT  
INSÉRÉ DANS LE TUBE**

**SUITE AU DOS**

# COVID-VIRO<sup>®</sup> nasal Test Antigénique rapide COVID-19 **MODE OPÉRATOIRE**

## 4 PROCÉDURE

## 5 LECTURE



**ATTENDRE 15 MINUTES  
AVANT DE LIRE LE TEST**

Lire le test à la lumière naturelle ou avec un éclairage suffisant afin de distinguer les bandes colorées de faible intensité.



**h** Retirer la cassette du sachet et la poser sur une surface plane




**i** Déposer 4 gouttes d'échantillon dans le **puits échantillon (S)** de la cassette.

**LE FLACON DOIT ÊTRE MAINTENU À LA VERTICALE**



**VOTRE TEST EST NÉGATIF**

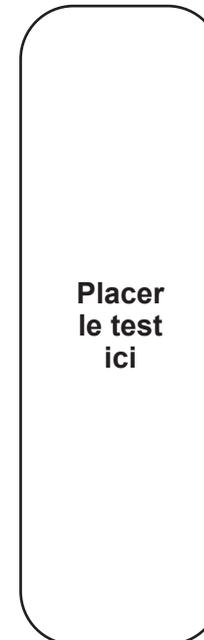

Placer le test ici



**VOTRE TEST EST POSITIF**



L'intensité des bandes rouges peut varier.

**CONTACT**

+33 (0) 1 46 00 40 40  
[contact@aazlab.fr](mailto:contact@aazlab.fr)

**AAZ**   
Votre santé sous contrôle

43, rue de Bellevue | 92100 Boulogne-Billancourt